

OSCIMED 2000



Plastersaw

Gipsverbandsäge

Scie à plâtre



OSCIMED 2000

VACUUM CLEANER

1 or 2 speeds, 3 filters, filtration 0.3 micron.

STAUBSAUGER

1 oder 2 Geschwindigkeiten, 3 Filter, Filtrierung 0.3 Mikron.


ASPIRATEUR

1 ou 2 vitesses, 3 filtres, filtration 0.3 micron.



ONLY
NUR
SEULEMENT

760 g.

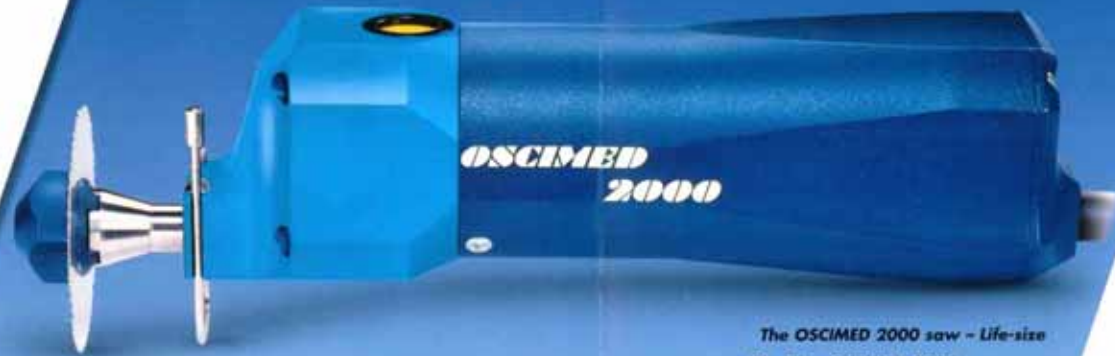

VERY LOW NOISE LEVEL THANKS
TO A PATENTED
ANTI-NOISE TECHNOLOGY
SEHR NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL
DANK PATENTIERTER TECHNOLOGIE

62 dB

TRÈS FAIBLE NIVEAU SONORE,
RÉSULTANT D'UNE TECHNOLOGIE
ANTI-BRUIT BREVETÉE

Light, modern carrying case
for the OSCIMED 2000 saw

Der Koffer der OSCIMED 2000:
leicht und modern wie die Säge

Mallette légère et moderne
de la scie OSCIMED 2000



The OSCIMED 2000 saw - Life-size

Die Säge OSCIMED 2000,
in Originalgröße

Scie OSCIMED 2000, grandeur
nature



High-safety, brushless, fanless
100 W - 24V motor.

Ergonomic, modern shape for single
handed use.

Instant blade change with a patented
non-slip lock nut.

Special saw blades with a
noise-suppressing central core.

Adjustable guide and depth gauge.

Niederspannungsmotor, bürstenlos,
ohne Ventilator, 100W - 24V.

Moderne ergonomische Form zur
Einhandbedienung.

Rascher Sägeblattwechsel bei
gleichbleibender Einstellung
(pat. System).

Spezielle Sägeblätter mit
geräuschenkendem Kernstück.

Einstellbarer Führungs-und
Tiefenanschlag.

Moteur brushless, sans ventilateur,
100W - 24V.

Forme ergonomique pour utilisation
avec une seule main.

Changement de lame instantané
par dispositif indérèglable
breveté.


Lames de scie spéciales à
noyau central anti-bruit.

Butée d'appui et de profon-
deur réglable.

Adjustable guide and depth gauge

Einstellbarer Führungs-und-
Tiefenanschlag

Butée d'appui et de profondeur
réglable

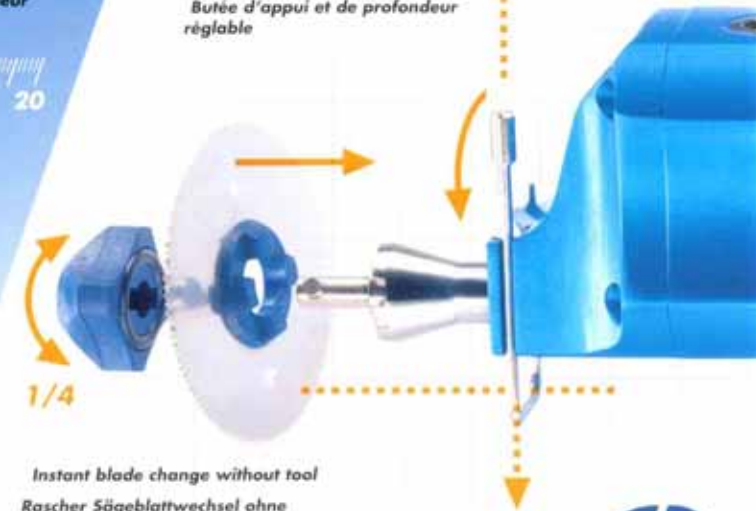

Instant blade change without tool

Rascher Sägeblattwechsel ohne
Werkzeug

Changement de lame instantané
sans outil

Patents pending



OSCHMIED 2000

Accessories Zubehör Accessoires

Complete plaster saw with carrying case and 2 blades BS-50 and WP-65
 Gipsverbandsäge Komplett mit Koffer und 2 Sägeblättern BS-50 und WP-65
 Scie à plâtre complète en mallette avec 2 lames BS-50 and WP-65

OSC 201

Complete plaster saw with support for vacuum nozzle, carrying case and 2 blades BS-50 and WP-65
 Gipsverbandsäge Komplett mit Stütze für Staubsaugerdüse im Koffer mit 2 Sägeblättern BS-50 und WP-65
 Scie à plâtre avec support de buse d'aspiration, en mallette avec 2 lames BS-50 et WP-65

OSC 20101

Blades Sägeblätter Lames de rechange	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Stainless steel blade with white core for plaster strip Rostfreies Sägeblatt mit weißem Kernstück für Gipsverband Lames de scies en acier inox à noyau blanc pour plâtre				
	WP-65	WP-65-2	WP-50	-
Special blade with blue core for synthetic strip Sägeblatt mit blauem Kernstück für synthetischen Verband Lame spéciale à noyau bleu pour bandage synthétique				
	BS-65	-	BS-50	BS-50-2
Very hard Titan blade with blue core for synthetic strip Sägeblatt mit Titan Bearbeitung für synthetischen Verband Lame avec revêtement Titan pour bandage synthétique				
	BS-65-GT	-	BS-50-GT	-

Blade lock-nut
Verschlussknopf für Sägeblatt
Bouton-fermoir pour lame

OSC 202

Case
Koffer leer
Mallette vide

OSC 204

Guide and depth-gauge
Führungs- und Tiefenanschlag
Butée d'appui et de profondeur

OSC 203

Vacuum nozzle
Düse für Staubsauger
Buse d'aspiration

OSC 205

Vacuum system
Staubsauger komplett
Aspirateur complet

OSC 206

Paper dust bag for vacuum system
Papiersäcke für Staubsauger
Sac pour aspirateur

OSC 207

Filters for Vacuum system
Staubsaugerfilter
Filtres pour aspirateur

OSC 208

CE

TECHNICAL DATA

Saw Weight: 760 g.
Power: 100 Watts
Length: 200 mm
Power supply: 85-264 VAC, 50-60 HZ
Working diameter: 46 mm
Cable lengths: mains to transformer 1 m
Cable lengths: mains to saw 3.5 m
Medical standard: EN 60601

Garantie: 1 year

TECHNISCHE DATEN

Gewicht der Säge: 760 g.
Leistung: 100 Watts
Länge: 200 mm
Speisung: 85-264 VAC, 50-60 HZ
Durchmesser: 46 mm
Länge des Stromkabels: 1 m
Länge des 24 V-Kabels der Säge: 3.5 m
Medizinnormen: EN 60601

Garantie: 1 Jahr

DONNÉES TECHNIQUES

Poids de la scie: 760 g.
Puissance: 100 Watts
Longueur: 200 mm
Alimentation: 85-264 VAC, 50-60 HZ
Diamètre utile: 46 mm
Longueur du câble du boîtier: 1 m
Longueur du câble 24V de la scie: 3.5 m
Normes médicales: EN 60601

Garantie: 1 année

Distributed by: Vertreten durch: Distribué par:

